

**WLAN** gör din dator fri från kablar vid uppkoppling till internet. **Simply Works** gör dig själv fri från kablar till datorn och du kan nu använda trådlös teknik för dator- eller joystickmus, tangentbord, knappfunktioner, mm. Fler möjligheter finns...

**Styr datorn trådlöst!**

**Nytt!**

**MOTTAGARE USB**  
En USB mottagare och interface som kan hantera upp till sex sändare samtidigt. Skiftläs och drag/håll indikeras med lysdioder för att förenkla identifiering när flera användare använder mus-och tangentbordsfunktioner.

**TRÅDLÖS JOYSTICKMUS**  
Trådlös joystickmus med en räckvidd av upp till 10 meter. Ergonomisk och robust utförande. (Även Pretorian Optimax joystickmus kan användas med Simply Works mottagaren. Optimax mottagaren är dock inte kompatibel.)

**TRÅDLÖS DATORMUS**  
Trådlös datormus med rullboll och med en räckvidd av upp till 10 meter. Ergonomisk och robust utförande. (Även Pretorian Optimax datormus kan användas med Simply Works mottagaren. Optimax mottagaren är dock inte kompatibel.)

**TANGENTBORD**  
Ett stort och robust tangentbord med stora tangenter och inbyggd Simply Works sändare. Svensk version beräknas vara tillgänglig för leverans i början av 2011.

**MOTTAGARE ENKEL**  
En 1-kanals mottagare för batteridrivna leksaker. Direktutgång. Kan användas tillsammans med valfria Simply Works sändare. Litet format så att den kan sättas fast på leksaken.

**MOTTAGARE STANDARD**  
En 1-kanals mottagare för kontaktstyrda utrustningar och batteridrivna leksaker. Kan användas tillsammans med valfria Simply Works sändare. Flera olika funktionssätt kan väljas, t ex direkt, växlande, tidsfördröjd, mm. Litet format så att den kan sättas fast på en leksak.

**MOTTAGARE PRO**  
En 2-kanals mottagare för kontaktstyrda utrustningar och batteridrivna leksaker. Kan användas tillsammans med valfria Simply Works sändare. Flera olika funktionssätt kan väljas, t ex direkt, växlande, tidsfördröjd, mm.


**KONTAKTSÄNDARE 125**  
En stor manöverkontakt (diameter 125 mm) med inbyggd sändare och extremt låg profil och låg erforderlig tryckkraft. Ett antal kontaktfunktioner kan väljas med hjälp av den inbyggda sifferdisplayen. Finns i flera olika färger.

**SÄNDARE**  
En en-kanals sändare som fungerar som interface mellan en valfri trådad manöverkontakt och Simply Works MOTTAGARE. Ett antal kontaktfunktioner kan väljas med hjälp av den inbyggda sifferdisplayen.

**Styr batteridrivna leksaker trådlöst!**

**Pretorian Technologies Ltd** (tillverkar sedan flera år n-ABLER Trackball och Joystick, Optimax m fl) - erbjuder nu ett nytt sortiment av produkter för trådlös styrning av datorer, leksaker, olika lågspänningsapparater, mm, som kallas **Simply Works**.

**Simply Works** arbetar med kodade signaler, som överförs via radiosignaler. Strömförsörjning görs med vanliga batterier (utom MOTTAGARE USB). Räckvidden mellan sändare/mottagare är högst 10 meter.

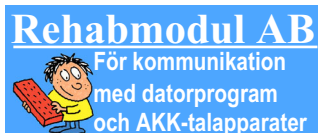

Enspännargatan 10  
165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90

För att styra en dator kan följande delar ingå:  
Nödvändigt är 1 st MOTTAGARE USB (6 kanaler) som ansluts till USB-porten. Sedan en TRÅDLÖS DATOR- eller JOYSTICKMUS och eventuellt ett TANGENTBORD (om inte WiViK 3 används). Om särskilda knappfunktioner behövs (ett urval finns att välja på) kan man komplettera med SÄNDARE (för valfri MK) eller KONTAKTSÄNDARE 125.

För att styra en batteridrivna leksak kan följande delar ingå:  
Nödvändigt är 1 st MOTTAGARE ENKEL (alternativt STD eller PRO) som ansluts till leksaken med 3,5 mm telekabel. Sedan en KONTAKTSÄNDARE 125 eller SÄNDARE (valfri manöverkontakt med 3,5 mm telepropp kan då användas).

Artikel - Simply Works	Pris	Pris inkl moms
Kontaktsändare 125, 4311	828:-	1 035:-
Mottagare Enkel, 4312	792:-	990:-
Mottagare Standard, 4313	936:-	1 170:-
Mottagare PRO, 4314	1 596:-	1 995:-
Paket med 4311 + 4312, 4315	1 516:-	1 895:-
Trådlös datormus, 6468	1 692:-	2 115:-
Trådlös joystickmus, 6469	2 580:-	3 225:-
Mottagare USB, 6510	596:-	745:-
Sändare, 6511	792:-	990:-
Tangentbord, 6512		Ej prissatt
Paket med 6510 + 6511, 6515	1 276:-	1 595:-

Angivna priser är per styck. Frakt tillkommer. Postförskottsavgift tillkommer för privatpersoner. Se även [www.hinfo.se](http://www.hinfo.se) och GP-prislistan, som gäller tills vidare. OBS! Fler produkter finns, se - [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)!